

NRC Publications Archive Archives des publications du CNRC

Artifacts removal with a piezoelectric fiber stretcher in Fourier domain OCT

Vergnole, Sébastien; Lamouche, Guy; Dufour, Marc; Gauthier, Bruno

This publication could be one of several versions: author's original, accepted manuscript or the publisher's version. /
La version de cette publication peut être l'une des suivantes : la version prépublication de l'auteur, la version
acceptée du manuscrit ou la version de l'éditeur.

For the publisher's version, please access the DOI link below. / Pour consulter la version de l'éditeur, utilisez le lien
DOI ci-dessous.

Publisher's version / Version de l'éditeur:

<https://doi.org/10.1117/12.761811>

Endoscopic Microscopy III (Photonics West 2008), pp. 68510G-1-68510G-3, 2008

NRC Publications Archive Record / Notice des Archives des publications du CNRC :

<https://nrc-publications.canada.ca/eng/view/object/?id=931a0ae1-1464-4fc8-ba35-be8a26fe455b>

<https://publications-cnrc.canada.ca/fra/voir/objet/?id=931a0ae1-1464-4fc8-ba35-be8a26fe455b>

Access and use of this website and the material on it are subject to the Terms and Conditions set forth at

<https://nrc-publications.canada.ca/eng/copyright>

READ THESE TERMS AND CONDITIONS CAREFULLY BEFORE USING THIS WEBSITE.

L'accès à ce site Web et l'utilisation de son contenu sont assujettis aux conditions présentées dans le site

<https://publications-cnrc.canada.ca/fra/droits>

LISEZ CES CONDITIONS ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER CE SITE WEB.

Questions? Contact the NRC Publications Archive team at

PublicationsArchive-ArchivesPublications@nrc-cnrc.gc.ca. If you wish to email the authors directly, please see the
first page of the publication for their contact information.

Vous avez des questions? Nous pouvons vous aider. Pour communiquer directement avec un auteur, consultez la
première page de la revue dans laquelle son article a été publié afin de trouver ses coordonnées. Si vous n'arrivez
pas à les repérer, communiquez avec nous à PublicationsArchive-ArchivesPublications@nrc-cnrc.gc.ca.

Artifacts removal with a piezoelectric fiber stretcher in Fourier domain OCT

Sébastien VERGNOLE, Guy LAMOUCHE, Marc DUFOUR and Bruno GAUTHIER
IMI-NRC, 75 bd de Mortagne, Boucherville (Qc), J4B 6Y4, Canada

Abstract

This paper reports the study of a Swept Source Optical Coherence Tomography (SS-OCT) setup. One of the main drawbacks of SS-OCT is its inability to differentiate positive and negative depths. Some setups have already been proposed to remove this depth ambiguity by introducing a modulation by means of electro-optic or acousto-optic modulators. In our setup, we implement a piezoelectric fiber stretcher to generate a periodic phase shift between successive A-scans, thus introducing a transverse modulation. The depth ambiguity is then resolved by performing a Fourier treatment in the transverse direction before processing the data in the axial direction. It is similar to the B-M mode scanning already proposed for Spectral-Domain OCT¹ but with a more efficient experimental setup.

Keywords: Optical Coherence Tomography, Swept Source OCT, Depth Ambiguity, Piezoelectric Fiber Stretcher

1. Experimental setup

Our SS-OCT setup is described on figure 1.

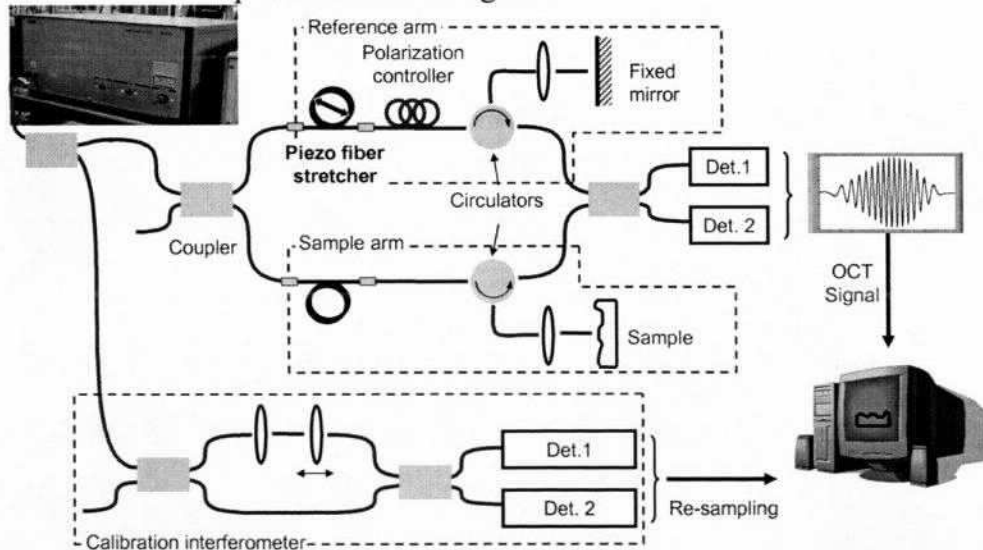


Fig. 1 – Experimental setup: The swept source is a Thorlabs one with a 1325 center wavelength and a 85 nm bandwidth. The repetition rate is 16 kHz. The discrete phase step between two consecutive A-scans is provided by the piezo fiber stretcher.

This is a Mach-Zehnder fiber-based interferometer. The source is a Thorlabs swept-source with a 1325 nm center wavelength and a 85 nm FWHM. The theoretical axial resolution is $\delta z = 9.1 \mu\text{m}$ in air. The A-scan rate is 16 kHz when using both the backward

and the forward wavelength scans. The setup is fitted with a piezoelectric fiber stretcher (PFS). The PFS is from Optiphase (PZ1-STD-FC/APC). Around 10 m of fiber are wound around a cylindrical piezoelectric transducer. Figure 2 gives the shape of the low voltage applied to the PFS. The PFS drive voltage is adjusted to achieved a $\pi/2$ phase shift between two consecutive forward wavelength scan interferograms. The system operates at a reduced rate of 8 kHz since we only use the forward wavelength scans.

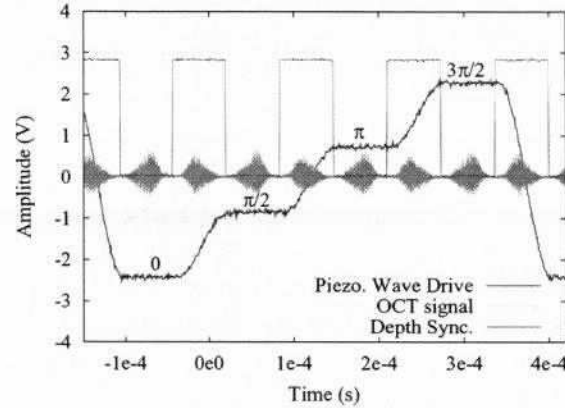


Fig. 2 – Red: PFS DriveWave, Green: OCT signal, Black: Depth synchronization. The PFS drive wave is synchronized with the depth sync. signal. Each step of the PFS drive wave happens for a forward wavelength scan.

2. Signal processing

The signal processing is basically the same as the one used in Yasuno et al.¹. It has some similarity with phase shifting interferometry. It can be illustrated with the simple case of a single reflector. For a B-scan, a simplified version of the interferometric signal is:

$$i(x, \nu) = k_0 + \cos(k_x x + k_\nu \nu) \quad (1)$$

where k_0 is a constant that includes the autocorrelation terms, k_x is linked with the phase shift introduced by the PFS, x is the transverse position, k_ν is linked with the wavelength sweeping of the source and ν is the optical frequency.

We, first, compute the transverse Fourier transform (along x):

$$I(u, \nu) = \mathcal{F}_x[i(x, \nu)] = k_0 \delta(u) + \frac{1}{2} \cdot \delta(u - k_x) \cdot \exp(-ik_\nu \nu) + \frac{1}{2} \cdot \delta(u + k_x) \cdot \exp(ik_\nu \nu) \quad (2)$$

where u is the Fourier conjugate of x , $k_0 \delta(u)$ is the DC component, the second term on the right hand side is the OCT data, and the last term is the complex conjugate of the second one.

A high-pass filtering with a rectangular window is then performed to keep only the data corresponding to the OCT signal to yield:

$$\hat{I}(u, \nu) = \frac{1}{2} \cdot \delta(u - k_x) \cdot \exp(-ik_\nu \nu) \quad (3)$$

Then, we compute the inverse transverse Fourier transform

$$\hat{i}(x, \nu) = \mathcal{F}_x^{-1}[\hat{I}(u, \nu)] = \frac{1}{2} \cdot \exp(-ik_x x) \cdot \exp(-ik_\nu \nu) \quad (4)$$

Finally, the axial Inverse Fourier transform is evaluated:

$$\hat{I}(x, z) = \mathcal{F}_\nu^{-1}[\hat{i}(x, \nu)] = \frac{1}{2} \cdot \exp(-ik_x x) \cdot \delta(z - k_\nu) \quad (5)$$

where z is the Fourier conjugate of ν and corresponds to the depth position. To obtain the OCT image, we keep the amplitude of the complex number $\hat{I}(x, z)$ obtained in equation (5).

3. Experimental results

Figure 4 shows the onion image obtained with the PFS setup before and after signal processing. Here the DC artifact is completely removed and the mirror image is greatly reduced. The cells of the onion can be clearly seen.

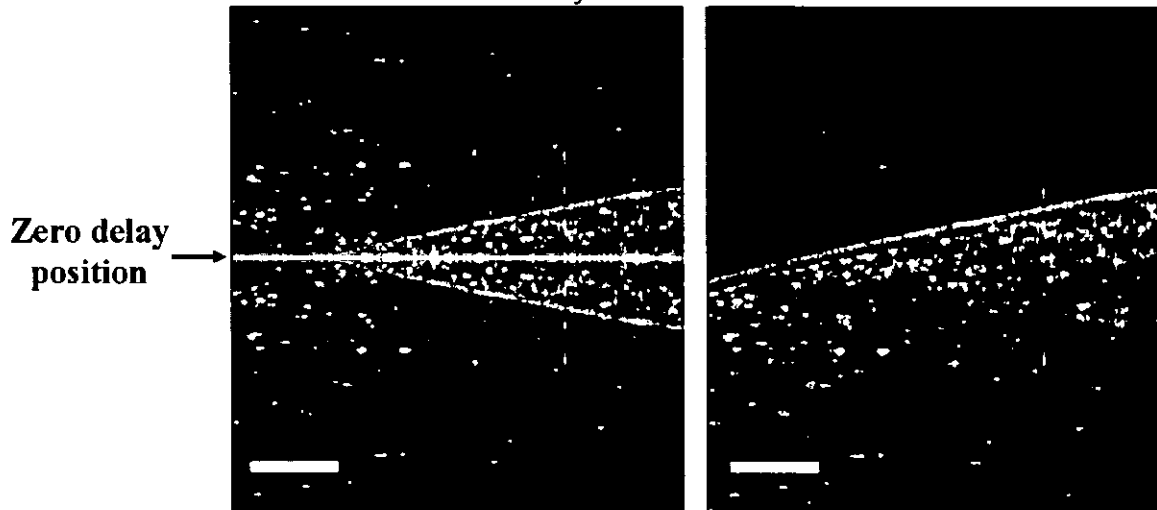


Fig. 4 – Images of an onion with the PFS setup. Left: raw data without processing. Right: with processing. Images are 2.5 mm wide and 3 mm depth. The horizontal white line at the bottom left of each image is 500 μm .

4. Conclusion

To conclude, we can say that an implementation of a B-M type scanning with a piezoelectric fiber stretcher in an SS-OCT setup provides images with greatly reduced artifacts. The main advantages of using such a technique to remove artifacts are the following:

- The setup is an all-fibered interferometer (low power losses and very easy to implement).
- We use low voltage (< 10 Volts) which it is not so often with the use of piezoelectric transducer.
- There is no polarization effect in the fiber stretching process as we are stretching the fiber over a span of λ .
- It is applicable to SD-OCT.

Reference

1. Y. Yasuno, S. Makita, T. Endo, G. Aoki, M. Itoh, and T. Yatagai, "Simultaneous B-M-mode scanning method for real-time full-range fourier domain optical coherence tomography," *Applied Optics* 45(8), pp. 1861–1865, 2006.